



腳踏配件安裝

安裝影片連結

隨附工具

- T25 星型起子
- T30 星型起子
- 3mm 內六角起子
- 10mm 扳手
- 2 片安裝墊片

腳踏配件零件

- 腳踏管
- 2 組車架固定夾
- 2 組快拆夾
- 收納套筒
- 2 支加長型靠背螺絲



收納套筒安裝步驟

1) 選擇左側或右側靠背圓管進行安裝，安裝時紅色強化織帶朝 Zeen 車體內側。

2) 將 Zeen 車體局部折疊，釋放靠背螺絲的張力。




3) 取下選定側固定靠背布面的兩支



T25 螺絲，以及底部的螺栓與螺母（需搭配 T30 起子 + 10mm 扳手），原底部五金配件請妥善保留。

4) 使用隨附加長螺絲替換原短螺絲，穿過收納套筒與靠背金屬孔環，鎖入靠背圓管。

5) 將底部螺栓、螺母重新穿過套筒底部金屬孔環並鎖固。

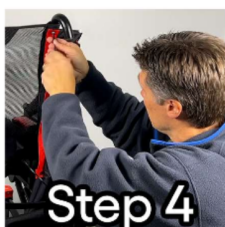

6) 拉動束帶收緊套筒開口。

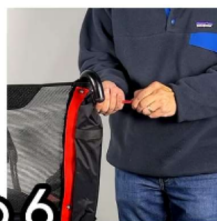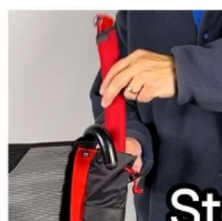

腳踏車架安裝步驟

1) 將前輪轉向遠離使用者站立的方向。



2) 把隨附墊片套在前輪遮板上方的前車架圓管處。

3) 輕鬆旋下紅色固定插銷，在螺紋處滴兩滴螺絲固定劑，再裝回插銷並以手旋緊。



4) 將腳踏固定支架套在前車架圓管上，置於墊片上方；務必讓固定束帶朝向 Zeen 車架外側。

備註：固定束帶需朝向外側



Note: Retaining Straps towards outside

5) 將快拆夾鬆套在固定支架後側；安裝快拆夾時，凸輪扳手需朝向車架內側。



6) 將腳踏管試裝於鬆置的固定支架上，轉動腳踏支架，使腳踏管兩端置中、支架對準車體原有腳踏反光片。

7) 快拆夾維持未扣緊狀態，以手將快拆旋鈕完全鎖緊，再向下壓下凸輪扳手完成固定。



8) 拆下腳踏管與墊片，露出紅色固定插銷底部的平面；將車輪轉回車架後方。以 10mm 扳手抵住插銷底部固定，維持固定束帶朝外，從下方使用 3mm 起子鎖入紅色插銷至緊實，兩側皆重複此步驟。



重要備註：固定束帶務必隨時扣合，可綁於圓管上或自身扣合固定。